

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT"

Κωδικός	COXA HIT				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Ισχιών σε εκ.	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Χρώμα	Μαύρο				

Δεξιά - Αριστερή

- Κατασκευή από ύφασμα διπλής περιέλιξης με ειδική πλέξη δύο στρωμάτων τύπου "MICROKLIMA" αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό, μη τοξικό.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες εφαρμογής στη Λεκάνη, στο Ισχίο και στο Μηρό.
- Διαθέτει εσωτερικά επιθέματα "IN GEL" θερμο - κρυοθεραπείας (βλέπε οδηγίες σελ. 437).
- Ιδανική για μακρά χρήση.
- Μπορεί να πλυθεί.





Ενδείξεις: Ιδανική για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Ουλακική Τροχαντηρίτιδα Ισχίου.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ "ΡΟΗΟ"

Κωδικός	8200 - 6		
Μέγεθος	S	M	L
Περιφ. κ. τριτημ. Μηρού σε εκ.	31/36	37/43	43/50
Υψος	Ρυθμιζόμενο		

Δεξιάς - Αριστερός

- Συνδυαστική κατασκευή από Οσφυϊκή ζώνη, κοιλότητα Μηρού, πολυκεντρικό μεταλλικό μηχανισμό.
- Ζώνη Οσφύος με δέρμα. Επένδυση με ύφασμα που εφαρμόζει με κορδόνια.
- Κατασκευή κοιλότητας Μηρού από ευπροσάρμοστο πλαστικό. Διαθέτει ιμάντα στήριξης.
- Ρυθμιζόμενου ύψους ελαφρύς πολυκεντρικός μηχανισμός "LERMAN" ρύθμισης Κάμψης, Έκτασης από 0° - 90°, με Επαύξηση ανά 10° με ειδικό κλειδί.
- Προσφέρει Απαγωγική Ακίνητοποίηση Ισχίου 20°.

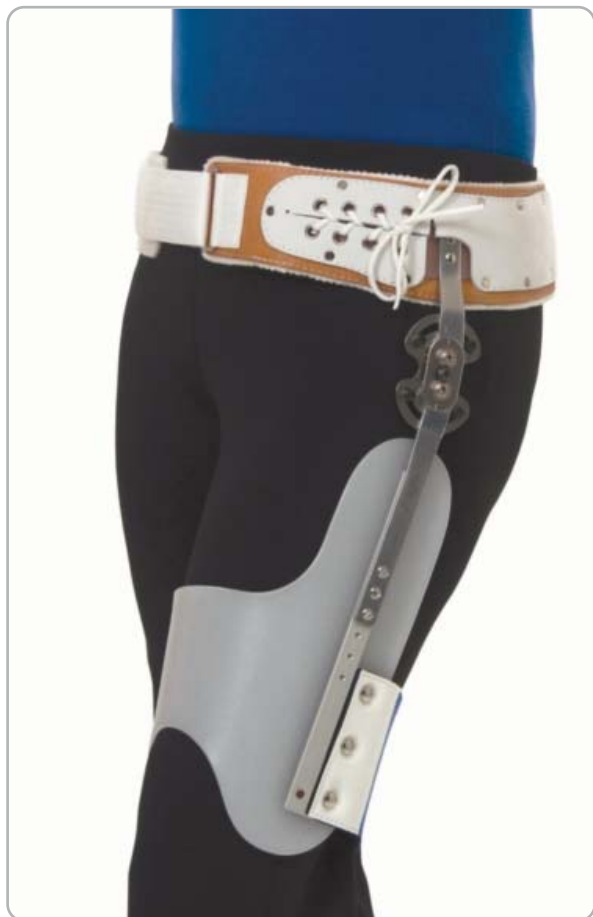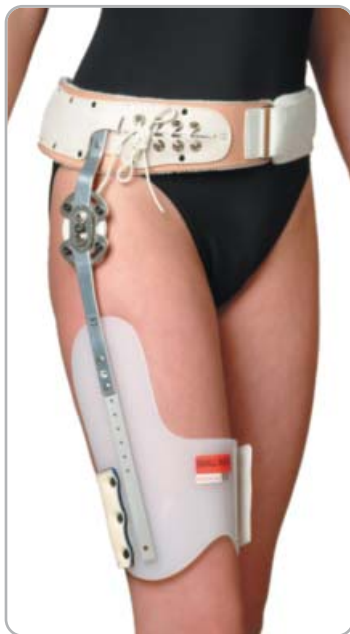

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Πρόληψη Εξαρτηρίματος σε: Αρθροπλαστική, Ημιαρθροπλαστική Ισχίου - REVISION Ισχίου.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ "HIPOLITE"

Κωδικός	HIPOLITE
	ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Ελαφρύτερου βάρους από όλους τους Νάρθηκες Ισχίου.
- Εξωτερική και εσωτερική επένδυση από δικτυωτό ύφασμα σε μορφή πλέγματος τύπου "SILVER FIBER" το οποίο είναι αεριζόμενο με αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική, **αντιμικροβιακή δράση** εξουδετερώνει τα μικρόβια, καταπολεμά την **κακοσμία** και **απομακρύνει** την υγρασία. Μπορεί να πλυθεί όσες φορές χρειασθεί.
- Ο Νάρθηκας ισχίου "HIPOLITE" διαθέτει υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης.

ΤΜΗΜΑ ΟΣΦΥΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ

Κωδικός	HIPOLITE / P		
Μέγεθος	S	M	L
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	60/84	84/110	110/135
	Δεξιό - Αριστερό		

- Διαθέτει πλαστικές υποδοχές με μεταλλικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν την περιφέρεια της Οσφύος και της Λεκάνης για τέλεια εφαρμογή.
- Διαθέτει μηχανισμό για τη ρύθμιση του ύψους του πολυκεντρικού μηχανισμού στο **Ανατομικό κέντρο** του Ισχίου.
- Διαθέτει αυτοκόλλητο ενσωματωμένο ελαστικό ιμάντα Κοιλίας που αυξάνει τη σταθεροποίηση και την καλύτερη εφαρμογή του Νάρθηκα.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΡΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ


Κωδικός	HIPOLITE / T		
Μέγεθος	S	M	L
Περιφ. Άνω Μηρού σε εκ.	43/54	54/65	65/75
	Δεξιό - Αριστερό		

- Διαθέτει πλαστικές υποδοχές με μεταλλικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν την περιφέρεια του Μηρού για τέλεια εφαρμογή.
- Διαθέτει μηχανισμό για τη ρύθμιση του ύψους του πολυκεντρικού μηχανισμού στο **Ανατομικό κέντρο** του Ισχίου.

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ "KINESIO"

Κωδικός	HIPOLITE / H	
Μέγεθος	REGULAR	LONG
Ύψος Ασθενούς σε εκ.	Έως 180	Άνω 181

- Κατασκευή από αλουμίνιο και ασάμι υψηλής αντοχής.
- Ενσωματωμένος πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης: Κάμψης - Έκτασης από 0° - 120° με Επαύξηση ανά 15°. Απαγωγικής ρύθμισης από 0° - 90° με Επαύξηση ανά 7,5°.
- Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής Κάμψης - Έκτασης - Απαγωγής.
- Διαθέτει πλαστικό προσθαιρούμενο κλείστρο ασφαλείας.

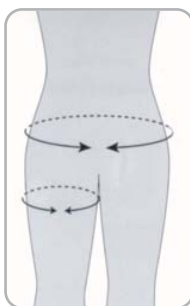

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε: Εξάρθρωμα Σε Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου. Εξάρθρωμα Σε Ημιολική Αρθροπλαστική Ισχίου. Εξάρθρωμα Σε Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Ισχίου (REVISION).

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ "ΗΙΡΟ"

Κωδικός 3700

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Κατασκευή από σκληρό πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.
- Προσθαφαιρούμενες αυτοκόλλητες επένδυσεις από ύφασμα αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό.
- Εφαρμογή με Nylon ιμάντες και πλαστικούς μηχανισμούς.
- Διαθέτει μηχανισμό για τη ρύθμιση του ύψους του πολυκεντρικού μηχανισμού στο **Ανατομικό κέντρο** του Ισχίου.

ΤΜΗΜΑ ΟΣΦΥΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ

Κωδικός 3700 / P

Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Οσφύος (Α) σε εκ.	60/82	80/96	94/115	99/120
Περιφ. Λεκάνης (Β) σε εκ.	68/90	90/110	106/126	111/131

Δεξιό - Αριστερό

ΤΜΗΜΑ ΜΗΡΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ

Κωδικός 3700 / T

Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Μηρού (C) σε εκ.	44/53	48/60	57/68	62/76
Περιφ. Μηρού (D) σε εκ.	34/41	36/45	42/49	46/56



Δεξιό - Αριστερό

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ "ΚΙΝΗΣΙΟ"

Κωδικός 3700 / H

Μέγεθος	REGULAR	LONG
Ύψος Ασθενούς σε εκ.	Έως 180	Άνω 181

- Κατασκευή από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής.
- Ενσωματωμένος πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης:
Κάμψης - Έκτασης από 0° - 120° με Επαύξηση ανά 15°.
Απαγωγικής ρύθμισης από 0° - 90° με Επαύξηση ανά 7,5°.
- Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής Κάμψης - Έκτασης - Απαγωγής.
- Διαθέτει πλαστικό προσθαφαιρούμενο κλείστρο ασφαλείας.

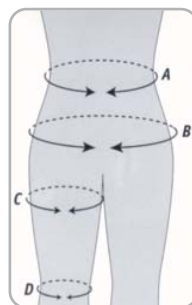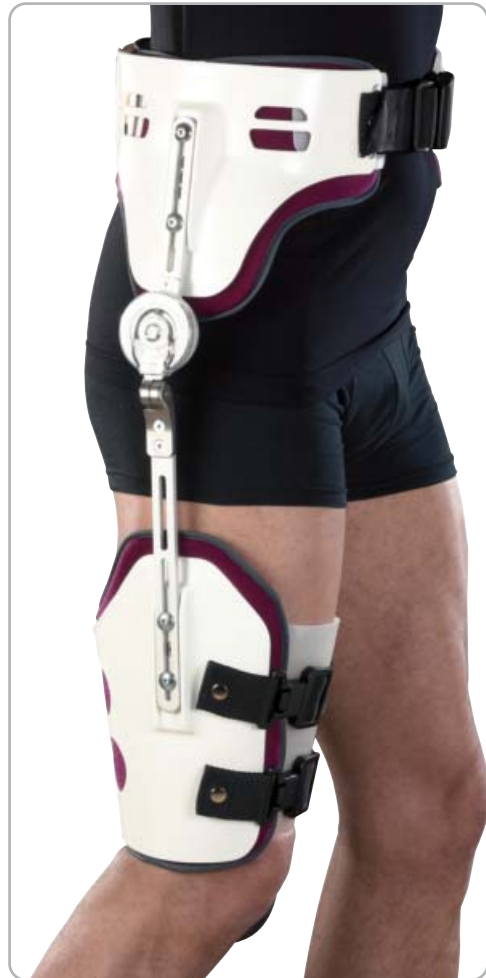

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε:
Εξάρθημα Σε Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου.
Εξάρθημα Σε Ημιολική Αρθροπλαστική Ισχίου.
Εξάρθημα Σε Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Ισχίου (**REVISION**).

ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ "KAFO"
ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΙΣΧΙΟΥ "HIPO"

Κωδικός	KAFO			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Μέγεθος Υποδήμ.	37/41	41/43	44/46	Άνω 46
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	Από 63 Έως 75			
	Δεξιός - Αριστερός			


- Κατασκευή από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Σύστημα αυξομείωσης ύψους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία.
- Συνδέεται με τον Νάρθηκα Ισχίου "HIPO" με κωδικό 3700.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης Γόνατος με πλαστικό κλείστρο. Κλειδώνει σε θέση Κάμψης - Έκτασης του Γόνατος 0°.
- Προσφέρει δυνατότητα ελεύθερης Κάμψης - Έκτασης του Γόνατος.
- Προσθαφαιρείται εύκολα και γρήγορα εφόσον είναι απαραίτητο.
- Διαθέτει ενσωματωμένο Νάρθηκα Ποδοκνημικής διπλής πλαστικής βαλβίδας με υφασμάτινες επενδύσεις και αυτοκόλλητους ιμάντες.
- Ειδικό πλαστικό υπόδημα από πολυαιθυλένιο ελαφρού βάρους με αυτοκόλλητο ιμάντα εφαρμογής στη ραχιαία επιφάνειά του. Επιτρέπει την Κάμψη - Έκταση της Ποδοκνημικής.



Ενισχύει τις Ενδείξεις του Νάρθηκα HIPO με Κωδ. 3700 σε:
Εξάρθημα Σε Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου.
Εξάρθημα Σε Ημιολική Αρθροπλαστική Ισχίου.
Εξάρθημα Σε Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Ισχίου (**REVISION**).



ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΚΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΝΑΡΘΗΚΑ ΙΣΧΙΟΥ ΗΠΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 3700.

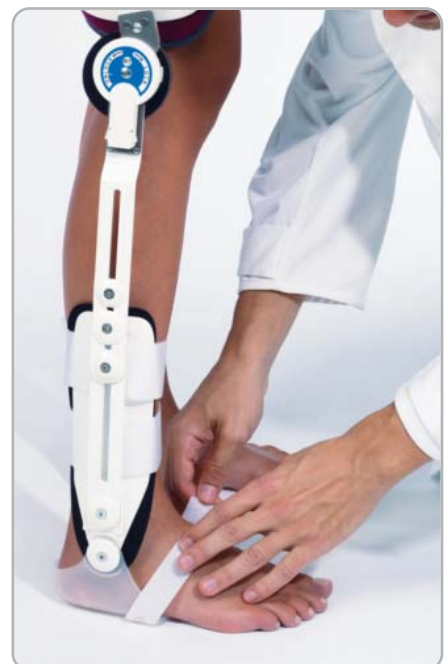

ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ.



ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΙΩΝ "HIP ABDUCTION PILLOW"

Κωδικός	HIP PILLOW
Μέγεθος	Κοινό
Πρόσθιο Πλάτος σε εκ.	18
Οπίσθιο Πλάτος σε εκ.	15
Μήκος σε εκ.	45

- Κατασκευή από ελαστικό **FOAM** υψηλής πυκνότητας, με αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική δράση. Υψηλής ποιότητας και αντοχής, αεριζόμενο, με αντιμικροβιακή δράση, που καταπολεμά και απομακρύνει την κακοσμία.
- Διαθέτει δύο μαλακούς εξωτερικούς αυτοκόλλητους ιμάντες στερέωσης που συνδέονται με το **FOAM** αυτοκόλλητα.
- Το μαξιλάρι φουσκώνει αυτόματα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας του.
- **Τοποθετούν και διατηρούν τα Ισχία σε προεπιλεγμένη θέση Απαγωγικής ακίνητοποίησης.**
- **Επαναρυθμίζουν τη θέση επιλογής Απαγωγικής Ακίνητοποίησης των Ισχίων εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.**
- Μπορεί να πλυθεί.

Ενδείξεις: Ιδανικό για την Πρόληψη Εξαρθρήματος του Ισχίου μετά από Ολική Αρθροπλαστική.

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΞΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

Κωδ. 1562 Μεταλλικός μηχανισμός έλξης Ισχίου.

Κωδ. 1570 Υφασμάτινη επιστραγαλίδα με ιμάντες σύνδεσης.

Κωδ. 3015 Μεταλλική αφίδα 15 εκ. από επινικελωμένο αλουμίνιο, σχοινί και πλαστικό γάντζο.

Κωδ. 3022 Nylon θήκη νερού μέχρι 9 lt.

- Αντικαθιστά πλήρως την συμβατική δερματική έλξη.



Ενδείξεις: Ιδανικό για Μετατραυματική χρήση σε: Κατάγματα Άρθρωσης Ισχίου.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΞΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

Κωδικός	1570			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Σφυρών σε εκ.	15/21	22/27	28/33	33/38
Χρώμα	Λευκό			

- Κατασκευή από μαλακό ύφασμα υψηλής ανθεκτικότητας αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό, αεριζόμενο μη τοξικό.
- Τρεις αυτοκόλλητοι σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- Οπίσθια ενισχυμένη ραφή.
- Υφασμάτινοι ιμάντες με ενσωματωμένους μεταλλικούς κρίκους. Συνδέεται με τον **κωδ. 3015**.
- Ανοιχτή πτέρνα.
- Μπορεί να πλυθεί.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΞΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

Κωδικός	1562
Μέγεθος	Κοινό

- Κατασκευή από επινικελωμένο αλουμίνιο υψηλής αντοχής.
- Τρεις πλαστικές τροχαλίες με μεταλλική επένδυση.
- Βάση τοποθέτησης που εφαρμόζεται με το στρώμα της κλίνης.
- Ρυθμιζόμενο κάθετο τμήμα από **0° έως 90°**.



